

ERSTE HILFE



SICHERHEIT SCHAFFEN
MIT SCHNELLER UND
EFFEKTIVER ERSTEN HILFE

Augenspülungen
Pflaster
Erste-Hilfe Stationen

plum

Erste-Hilfe Konzepte für Ihren Arbeitsplatz

Mit den Produkten von Plum wird schnelle und effektive Erste-Hilfe an Ihrem Arbeitsplatz sichergestellt. Dadurch können das Ausmaß der Verletzung und die damit verbundenen Folgen begrenzt werden.



Jeden Tag passieren kleinere und größere Unfälle. Daher ist es wichtig, immer Erste-Hilfe-Material zur Hand zu haben – im Idealfall dort, wo der Unfall geschieht. Wir bieten Ihnen eine große Auswahl an Erste-Hilfe-Produkten für die schnelle, sichere und hygienische Versorgung von Augen- und Schnittverletzungen sowie kleineren Wunden. Damit die Erste-Hilfe immer griffbereit zur Verfügung steht, haben wir sowohl stationäre als auch mobile Lösungen entwickelt.

MASSGESCHNEIDERTE LÖSUNGEN FÜR SCHNELLE UND EFFEKTIVE HILFE

Unsere Erste-Hilfe-Produkte umfassen Pflaster, Wundreinigungstücher und eine große Produktauswahl an Augenspüllösungen. Sie können die Produkte nach Ihren Wünschen zusammenstellen. Das Wichtigste dabei ist, dass die ausgewählten Erste-Hilfe-Produkte genau die Unfälle abdecken, die in Ihrer Branche, an Ihrem Arbeitsplatz oder in Ihrer Abteilung auftreten können.



GROSSTEIL DES SEHVERMÖGENS VERLOREN

Die Hanstholm Fischmehl-Fabrik verfügt über hochmoderne Produktionsanlagen. Bis zu jenem folgenschweren Unfall eines Mitarbeiters umfasste die Erste-Hilfe-Ausstattung nur gewöhnliche Augenspüllflaschen. „Eine Dichtung löste sich und austretende Lauge traf beide Augen. Als Folge verlor der Mechaniker einen Großteil seines Sehvermögens. Hätten wir pH Neutral Duo im Einsatz gehabt, würde unser Mitarbeiter wohl noch beide Augen benutzen können“ berichtet Ronni Jørgensen.



Die grüne Augenspülflasche entfernt Schmutz und Fremdkörper aus dem Auge

Die blaue pH Neutral wird zur Neutralisation von Säuren und Basen eingesetzt.

Leicht zusammenrückbare Flaschen, die sich einfach mit einem weichen Strahl entleeren lassen.

Übersichtliche Piktogramme erklären deutlich die Anwendung des Produktes.

Ergonomisch geformte weiche Augenschale. Leicht zusammendrücken, bevor die Augenschale auf das Auge gesetzt wird. Dadurch wird das Auge offengehalten und eine gleichmäßige, weiche Spülung kann erfolgen.



Schnell und leicht zu öffnen. Spülkopf in Pfeilrichtung drehen, bis die Versiegelung bricht. Die Flasche ist dann sofort einsatzbereit.



Unsere Flaschen haben eine Haltbarkeit von 3 Jahren. Das Haltbarkeitsdatum steht deutlich auf dem Etikett

Mit dem DUO Augenspülaufsatz können beide Augen gleichzeitig gespült werden. Der Aufsatz unterstützt das Offenhalten der Augen und sorgt für eine gleichmäßige, weiche Spülung

Umfangreiches Augenspülkonzept

Die grüne Plum Augenspülflasche entfernt Fremdkörper, mit der blauen pH Neutral werden Säuren und alkalische Substanzen neutralisiert.

SIE HABEN NUR ZWEI AUGEN – PASSEN SIE GUT DARAUF AUF!

Unser Sehvermögen ist für die meisten Tätigkeiten von entscheidender Bedeutung – daher sollten Sie auf Ihre Augen achten. Eine gute Pflege und der gesunde Menschenverstand sind jedoch leider nicht immer genug, denn niemand kann sich vor Unfällen schützen. Sie können aber etwas dafür tun, um sich darauf vorzubereiten. Mit unseren Augenspüllösungen sind Sie bestmöglich versorgt.

EIN WICHTIGER MOMENT

Bei einem Unfall können wenige Sekunden darüber entscheiden, ob Ihr Augenlicht beeinträchtigt wird. Daher ist der schnelle Zugang zu einer Augenspüllösung wichtig – an allen Arbeitsplätzen, wo ein Risiko für Augenverletzungen besteht.

AUGENSPÜLLÖSUNGEN MIT BREITEM PRODUKTSORTIMENT

Die Plum Augenspüllösung ist zum Ausspülen von Fremdkörpern aus dem Auge bestimmt und die pH Neutral Augenspüllösung für die Neutralisierung von Säuren und einer Vielzahl von alkalischen Substanzen. Die große Produktauswahl garantiert, dass Sie eine optimale Lösung, die Ihren persönlichen Anforderungen gerecht wird, bei uns erhalten. Stationen in verschiedenen Größen für die Wandmontage am direkt gefährdeten Arbeitsplatz, Gürteltasche zum Mitführen am Körper oder auch kleine handliche Lösungen für den mobilen Einsatz im LKW, Werkzeugkasten, Handschuhfach, Erste-Hilfe Kästen.



Hinweis: Für die Flaschen liegt eine CE Kennzeichnung vor. Alle Plum Augenspülflaschen entsprechen der DIN EN 15154-4 (Augenduschen ohne Wasseranschluss). Die Herstellung erfolgt nach dem Medizinproduktegesetz.



So beugen Sie Augenschäden vor

Die Plum Augenspüllösung spült Fremdkörper, Staub und Schmutz aus den Augen und pH Neutral neutralisiert Säuren und Laugen.

IN ZUSAMMENARBEIT MIT AUGENÄRZTEN ENTWICKELT

Wir haben unser Augenspülkonzept in enger Zusammenarbeit mit führenden Augenärzten entwickelt. Dies bedeutet, dass unsere Produkte bis ins kleinste Detail durchdacht sind. Die Augenspülflaschen sind einfach anzuwenden.

Übersichtliche Piktogramme erklären deutlich die richtige Anwendung und speziell entwickelte Augenschalen helfen, die Augen bei der Spülung offenzuhalten. Dadurch wird die Spülung mit einem gleichmäßigen weichen Strahl sichergestellt.



Nehmen Sie die Flasche aus der Box



Drehen Sie die Augenschale bis die Versiegelung bricht



Den Kopf zurücklehnen, Flasche leicht zusammendrücken und spülen



Oder mit vorgebeugtem Kopf die Augen von unten spülen

DIE FOLGENDE ÜBERSICHT ZEIGT IHNEN DIE RICHTIGE SPÜLLÖSUNG UND SPÜLZEIT FÜR UNTERSCHIEDLICHE SCHMUTZ- UND SCHADSTOFFEINWIRKUNGEN.

1	2	3	4
Bestimmen Sie den Schadstoff	Wählen Sie die richtige Flasche und Spüllösung	Setzen Sie die Spülung fort	Spülen Sie wie angegeben
Fremdkörper z.B. Staub, Schmutz, Metall- und Holzsplitter	Plum Augenspüllösung	Plum Augenspüllösung	Solange spülen, bis die Fremdkörper herausgespült sind.
Säuren	pH Neutral	Plum Augenspüllösung	Augen mit pH Neutral 2 Minuten spülen, bis die Flasche entleert ist. Die Spülung mit der Plum Augenspüllösung bis zur ärztlichen Behandlung fortsetzen.
Basen	pH Neutral	Plum Augenspüllösung	Augen mit pH Neutral 2 Minuten spülen, bis die Flasche entleert ist. Die Spülung mit der Plum Augenspüllösung bis zur ärztlichen Behandlung fortsetzen.
Andere Chemikalien (z.B. Lösungsmittel und Öle)	Plum Augenspüllösung	Plum Augenspüllösung	Augen solange spülen, bis das unangenehme Gefühl nicht mehr spürbar ist. Die Spülung mit der Plum Augenspüllösung bis zur ärztlichen Behandlung fortsetzen.
Chemikalien auf der Haut	pH Neutral	Plum Augenspüllösung	Haut mit pH Neutral 2 Minuten spülen, bis die Flasche entleert ist. Die Spülung mit der Plum Augenspüllösung bis zur ärztlichen Behandlung fortsetzen.

Wichtig: Bei allen Schäden soll das Auge mit einem weichen und gleichmäßigen Strahl gespült werden. Die Augenspülflasche während des Spülvorgangs nur leicht zusammendrücken. Ärztlicher Rat ist bei jeder Augenverletzung oder Verschmutzung einzuholen. Die Spülung sollte während des Transports zum Arzt fortgeführt werden.



Spülen Sie beide Augen gleichzeitig mit Plum DUO

Die grüne Plum Augenspülflasche entfernt Fremdkörper, mit der blauen pH Neutral werden Säuren und alkalische Substanzen neutralisiert.

BEI EINER VIELZAHL VON AUGENUNFÄLLEN SIND BEIDE AUGEN BETROFFEN

Die Erfahrungen zeigen, dass bei Augenunfällen mit Chemikalien häufig beide Augen betroffen sind. Mit den Plum DUO Augenspülflaschen können Sie beide Augen gleichzeitig spülen.

AUGENSPÜLAUFSATZ ZUR OPTIMALEN SPÜLUNG

Besonders bei Augenunfällen mit Säuren oder Alkali ist die Zeit ein wesentlicher Faktor. Maßgebend für die Schwere der Verletzung ist die Konzentration der Chemikalie sowie dessen Kontaktdauer. Deshalb ist es für eine optimale Erste-Hilfe notwendig, die Chemikalie so schnell wie möglich zu neutralisieren. Sollten beide Augen betroffen sein, sollte auf jeden Fall pH Neutral DUO eingesetzt werden.

Speziell geformte Augenaufsätze helfen die Augenlider während der Spülung offenzuhalten und ermöglichen dadurch eine weiche, gleichmäßige Spülung und ein korrekte Spülzeit. Die richtigen Spülzeiten können Sie aus der Tabelle auf der vorherigen Seite entnehmen.

Alle unsere Augenspülflaschen sind nur für den einmaligen Gebrauch bestimmt, um jederzeit eine sterile Spülung sicherzustellen.

plum



Augenspülung bei Fremdkörpern

Plum Augenspülung bietet Ihnen eine optimale Hilfe, wenn Schmutz, Staub, Splitter und andere Fremdkörper ins Auge gelangen.

Die Plum Augenspülflaschen enthalten eine sterile 0,9% Natriumchloridlösung, die dem natürlichen Salzgehalt des Auges entspricht. Die Produktpalette ist sorgfältig aufgebaut - von der kleinen handlichen Flasche, die Sie immer mit sich führen können, bis hin zu Wandstationen, die Erste-Hilfe im Notfall für Sie leicht zugänglich machen.

Erste-Hilfe ist zugleich doppelte Hilfe! Eine sofortige Spülung nach einem Augenunfall soll dazu führen, dass Fremdkörper sich nicht im Auge festsetzen und schwere Augenschäden verursachen.



**200 ML
PLUM AUGENSPÜLLÖSUNG**

Handliche Flasche mit steriler Natriumchloridlösung (0,9%). Für den mobilen Einsatz z.B. im Werkzeugkasten, Erste-Hilfe Kasten und Aufbewahrung in einer speziell hierfür lieferbaren Gürteltasche. Lieferung mit Staubkappe.

Spülzeit	ca. 2 Min.
Versandeinheit:	10 x 200 ml
Art.-Nr.:	4691
PZN:	4397388



**500 ML
PLUM AUGENSPÜLLÖSUNG**

Flasche mit steriler Natriumchloridlösung (0,9%). Die Flasche ist sowohl zur Nachfüllung der Augenspülstationen und Quick-Safe Boxen sowie für den Einzeleinsatz am Arbeitsplatz geeignet. Lieferung mit Staubkappe.

Spülzeit	ca. 5 Min.
Versandeinheit:	12 x 500 ml
Art.-Nr.:	4604
PZN:	4397402



**1000 ML
PLUM AUGENSPÜLLÖSUNG**

Flasche mit steriler Natriumchloridlösung (0,9%). Der Inhalt von 1000 ml ermöglicht eine verlängerte Spülzeit. Die Flasche ist zur Nachfüllung der Augenspülstation Maxi und für den Einzeleinsatz geeignet. Lieferung mit Staubkappe.

Spülzeit	ca. 10 Min.
Versandeinheit:	6 x 1000 ml
Art.-Nr.:	4707
PZN:	3099111



**500 ML
PLUM AUGENSPÜLLÖSUNG DUO**

Flasche mit steriler Natriumchloridlösung (0,9%). Der spezielle Augenaufsatz ermöglicht das gleichzeitige Spülen beider Augen. Die Flasche ist sowohl zur Nachfüllung der Augenspülstationen DUO und QuickSafe Boxen sowie für den Einzeleinsatz am Arbeitsplatz geeignet.

Spülzeit	ca. 2 Min.
Versandeinheit:	6 x 500 ml
Art.-Nr.:	4861
PZN:	10249858



**1000 ML
PLUM AUGENSPÜLLÖSUNG DUO**

Flasche mit steriler Natriumchloridlösung (0,9%). Der Inhalt von 1000 ml ermöglicht eine verlängerte Spülzeit. Die Flasche ist sowohl zur Nachfüllung der Augenspülstationen DUO sowie für den Einzeleinsatz am Arbeitsplatz geeignet.

Spülzeit	ca. 5 Min.
Versandeinheit:	6 x 1000 ml
Art.-Nr.:	4800
PZN:	6134546



**3 X 500 ML
PLUM AUGENSPÜLLÖSUNG**

Praktischer und handlicher Displaykarton mit Tragegriff, ideal für den mobilen Einsatz. Beinhaltet 3 Stk. 500 ml Plum Augenspüllösungen mit steriler Natriumchloridlösung (0,9%). Die Flaschen sind ebenfalls zur Nachfüllung der Augenspülstationen und QuickSafe Boxen sowie Einzeleinsatz geeignet. Lieferung mit Staubkappen.

Spülzeit	ca. 5 Min. je Flasche
Versandeinheit:	4 x 3 x 500 ml
Art.-Nr.:	4620
PZN:	10306384

ph Neutral kann Ihr Augenlicht retten

Unsere Augenspüllösung pH Neutral für die schnelle Neutralisierung von Säuren und Alkali bietet dokumentierte Sicherheit und Wirksamkeit.

WICHTIG

Informationen zu Flusssäure
Flusssäure ist eine Säure, die giftig und stark ätzend auf Haut und Knochen wirkt. Unsere Spüllösungen können diese ätzende Wirkung nicht begrenzen. Daher wird der Einsatz von pH Neutral und Plum Augenspülung bei Unfällen mit Flusssäure NICHT empfohlen.

DIE EMPFOHLENE ANWENDUNG VON PH NEUTRAL

pH Neutral ist als Erste-Hilfe Maßnahme für die Notfallspülung mit einer Spüldauer von 2 Minuten bestimmt. Ziel bei der Spülung mit einer Flasche pH Neutral ist es, den pH Wert so schnell wie möglich wieder auf ein unbedenkliches Niveau einzustellen, wenn Säuren oder Alkali mit dem Auge oder der Haut in Kontakt kommen. Zur Fortsetzung der Spülung auf dem Weg zum Arzt wird der Einsatz der Plum Augenspüllösung mit 0,9 % Natriumchloridlösung empfohlen. Ärztlicher Rat ist bei jeder Augenverletzung einzuholen.

GEFÄHRLICHE CHEMIKALIEN GIBT ES ÜBERALL

In vielen Arbeitsbereichen, in Unternehmen und in den unterschiedlichsten Branchen sind Sie der Gefahr ausgesetzt, einen Augenunfall durch Chemikalien zu erleiden. An Flughäfen, in Chemieanlagen, in der Recyclingindustrie, in Zementfabriken und auf Baustellen, im Bergbau oder in der Lebensmittel-, Metall- und Papierindustrie. Überall dort, wo starke Säuren und Alkali in der Herstellung und Reinigung eingesetzt werden. Es besteht immer das Risiko, dass etwas schief geht. Dichtungen können sich lösen oder eine Batterie kann explodieren. Deshalb sollte immer pH Neutral als Erste-Hilfe Maßnahme zur Augenspülung griffbereit zur Verfügung stehen.

WENIGE SEKUNDEN KÖNNEN ENTSCHEIDEND SEIN

Säuren und Alkali schädigen die Struktur der Haut und der Schleimhäute. Bei einem Unfall ist es erforderlich, die Substanz schnellstmöglich auf das Niveau des normalen pH Wertes von 7,4 zu neutralisieren. Der Effekt ist dabei am größten, wenn Säuren und Alkali noch nicht tiefer in das Gewebe eingedrungen sind. Wichtig ist bei Augenunfällen, dass die Hornhaut nicht beschädigt wird. Um größtmögliche Sicherheit zu gewährleisten, muss die Augenspülung folgende Eigenschaften aufweisen:

- Leichte Zugänglichkeit
- Schnell zu bedienen
- Wirksam

MASSGEBEND FÜR DIE SCHWERE DER JEWEILIGEN VERLETZUNG SIND HAUPTSÄCHLICH:


Konzentration der Chemikalie – starke Säuren und Alkali haben größeres Verätzungspotential. Temperatur – eine hohe Temperatur verstärkt die Verätzungseigenschaften von Chemikalien. Kontaktdauer – je tiefer die Durchdringung, desto größer die Gefahr schwerer Verletzungen.

DIE AUGENSPÜLLÖSUNG MUSS WIRKSAM SEIN

pH Neutral ist ein wirksamer Phosphatpuffer (4,9%), der bei Säuren und einer Vielzahl von alkalischen Substanzen neutralisierend wirkt. Die Flüssigkeit besteht aus Phosphatsalzen, die natürliche Bestandteile des Körpers sind. Im sauren Bereich wird der Pufferbestandteil Hydrogenphosphat durch die chemische Reaktion wirksam. Die häufig noch gefährlicheren Hydroxidionen (alkalisch) reagieren mit dem zweiten Pufferbestandteil Dihydrogenphosphat.

Die Wirkung von pH Neutral wird auch durch wissenschaftliche Studien bestätigt.^{1) 2)}

Abbildung 1: Neutralisierungseffekt von pH Neutral und 0,9% Natriumchloridlösung *

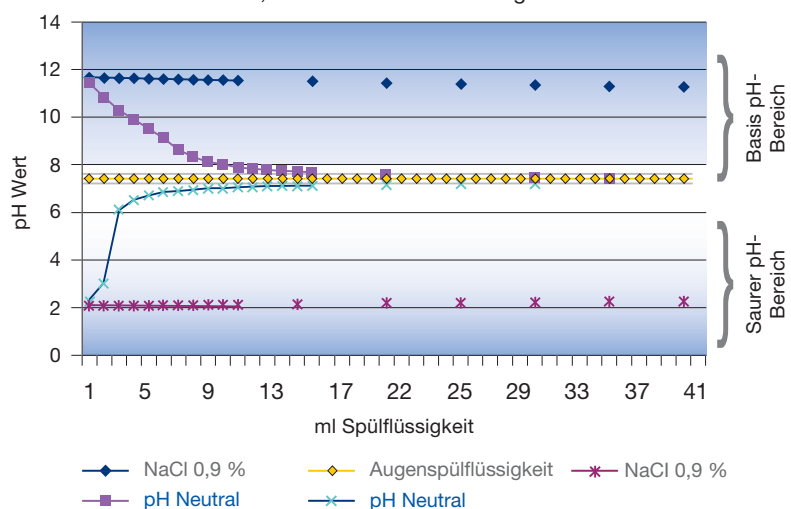

* Es handelt sich hierbei um eine von Plum A/S durchgeführte Titrationsanalyse im Labor (in vitro Test). Hierbei wurde die Flüssigkeit pH Neutral und 0,9 % Natriumchloridlösung schrittweise einer Lösung mit 1 Tropfen Schwefelsäure + 40 ml Leitungswasser bzw. 1 Tropfen Kaliumhydroxid + 40 ml Leitungswasser zugeführt. Die Änderungen des pH Wertes und die dafür erforderlichen Mengen von Spüllösung wurden für die Beurteilung des Effektes herangezogen.

1: Prof. Dr. med. Schrage N.F., Facharzt für Augenheilkunde an der Augenklinik Merheim, Ostmerheimer Str. 200 in 51109 Köln, in Kooperation mit dem Aachener Centrum für Technologietransfer in der Ophthalmologie ACTO, Geschäftsstelle Karlsburgweg 9 in 52070 Aachen, Vortrag: Augenverätzungen - Was gibt es Neues? Regionalforum Arbeitsmedizin, Stuttgart 23.02.2006, Folien 44 ff.

2: Prof. Dr. med. Schrage N.F., Facharzt für Augenheilkunde an der Augenklinik Merheim, Ostmerheimer Str. 200 in 51109 Köln, in Kooperation mit dem Aachener Centrum für Technologietransfer in der Ophthalmologie ACTO, Geschäftsstelle Karlsburgweg 9 in 52070 Aachen, Vergleichsergebnisse von pH Neutral an verätzten Augen, Spülversuche an mit NaOH verätzten Kanichenaugen im Vergleich von Plum pH Neutral mit physiologischer Kochsalzlösung, 24.05.2005.



200 ML PH NEUTRAL

Handliche Flasche mit steriler Phosphatpufferlösung (4,9%). Für die schnelle Neutralisierung von Säuren und Alkali. Für den mobilen Einsatz z. B. im Werkzeugkasten, Erste-Hilfe Kasten und Aufbewahrung in einer speziell hierfür lieferbaren Gürteltasche. Auch für die Nachfüllung der Augen-Notfallstationen und QuickSafe Boxen geeignet. Lieferung mit Staubkappe.

Spülzeit:	ca. 2 Min.
Versandeinheit:	10 x 200 ml
Art.-Nr.:	4752
PZN:	4397394



500 ML PH NEUTRAL DUO

Sterile 4,9 % Phosphatpufferlösung. Für die schnelle Neutralisierung von Säuren und Alkali. Ausgestattet mit einem Augenaufsatz zum gleichzeitigen Spülen beider Augen. Zum Einzeleinsatz und auch zur Nachfüllung der Augen-Notfallstation DUO und QuickSafe Boxen geeignet.

Spülzeit:	ca. 2 Min.
Versandeinheit:	6 x 500 ml
Art.-Nr.:	4801
PZN:	6134552



1000 ML PH NEUTRAL

Flasche mit steriler Phosphatpufferlösung (4,9%), Für die schnelle Neutralisierung von Säuren und Alkali auf der Haut. Ausgestattet mit einem speziellen Sprühkopf, der eine gleichmäßige Verteilung der Flüssigkeit über eine große Körperfläche gewährleistet. Kann auf dem Arbeitstisch abgestellt oder im Werkzeugkasten und LKW mitgeführt werden. Auch für die Nachfüllung der Station geeignet. Lieferung mit Staubkappe.

Spülzeit:	ca. 2 Min.
Versandeinheit:	6 x 1000 ml
Art.-Nr.:	4746
PZN:	64397419



„ UNFÄLLE MIT SÄUREN UND BASEN PASSIEREN DANN, WENN MAN ES AM WENIGSTEN ERWARTET.

pH Neutral DUO rettete einem Mitarbeiter bei SITA France das Augenlicht. Beim Sortieren von Abfall spritzte dem Mitarbeiter aus einer Plastikflasche ein Rest Reinigungsmittel in die Augen. Durch die sofortige Spülung mit pH Neutral DUO konnte der Schadstoff neutralisiert werden, und der Mitarbeiter kehrte bereits am nächsten Tag an seinen Arbeitsplatz zurück.



Erste-Hilfe muss sichtbar und schnell zugänglich sein

Deshalb können unsere Erste-Hilfe-Produkte an der Wand direkt am gefährdeten Arbeitsplatz montiert werden.

PLUM AUGENSPÜLSTATION DUO

Staubgeschützte Wandbox aus Polystyrol mit 2 x 1000 ml Plum Augenspülflaschen DUO und innenseitigem Spiegel. Besonders für den Einsatz an Arbeitsplätzen geeignet, wo Fremdkörper in die Augen gelangen können. Die Flaschen werden sicher vor Staub und Schmutz geschützt. Einfache Montage.

Spülzeit:	ca. 10 Min.
Versandeinheit:	1 Stk.
Art.-Nr.:	4816
Maße:	H: 357 x B: 252 x T: 116 mm
PZN:	6585272

ERSTE-HILFE MUSS ERNST GENOMMEN WERDEN

Die unterschiedlichen Stationen von Plum ermöglichen es Ihnen, im Notfall die Erste-Hilfe-Produkte schnell zur Hand zu haben. Dadurch ist die Erste-Hilfe leicht zugänglich und systematisiert. Verwenden Sie an Arbeitsplätzen mit einem hohen Staubaufkommen unsere staubgeschützten Wandboxen, um die Flaschen vor Verschmutzungen zu bewahren.

Mit einer an der Wand montierten Augenspülstation ist sichergestellt, dass die Mitarbeiter schnell versorgt werden können. Bevorraten Sie immer zusätzliche Flaschen, damit auf dem Weg zum Arzt ausreichend weitergespült werden kann.



200 ML PLUM AUGENSPÜLUNG IM EINZELKARTON

Handliche Flasche mit steriler Natriumchloridlösung (0,9 %) im geschützten Einzelkarton. Der robuste und praktische Einzelkarton lässt sich zur Entnahme der Flasche leicht und schnell öffnen. Für den mobilen Einsatz z. B. im Werkzeugkasten, Fahrzeugen, bei Gefahrguttransporten etc.

Spülzeit:	ca. 2 Min.
Versandeinheit:	10 Stk.
Art.-Nr.:	4695
Maße:	H: 58 x B: 58 x T: 163 mm
PZN:	11535388



500 ML PLUM AUGENSPÜLUNG IM EINZELKARTON

Flasche mit steriler Natriumchloridlösung (0,9 %) im geschützten Einzelkarton. Der robuste und praktische Einzelkarton lässt sich zur Entnahme der Flasche leicht und schnell öffnen. Zur Nachfüllung der Augenspülstationen und für den Einzeleinsatz geeignet. Der Einzelkarton ist auch mit einer passenden Wandhalterung erhältlich.

Spülzeit:	ca. 5 Min.
Versandeinheit:	12 Stk.
Art.-Nr. Einzelkarton:	4605
Art.-Nr. Einzelkarton m. Wandhalterung:	4609
Maße:	H: 79 x B: 79 x T: 214 mm
PZN 4605:	11535371
PZN 4909:	11535402



PLUM AUGENSPÜLSTATION DUO

Wandstation mit 1 x 1000 ml Plum Augenspülflasche DUO, Wandhalterung, beiliegendem Piktogramm und Spiegel. Für die schnelle und gleichzeitige Spülung beider Augen an kleineren Arbeitsplätzen. Einfache Montage.

Spülzeit:	ca. 5 Min.
Versandeinheit:	1 Stk.
Art.-Nr.:	4802
Maße:	H: 375 x B: 180 x T: 95 mm
PZN:	6134575



PLUM AUGENSPÜLSTATION IN WANDBOX

Staubgeschützte Wandbox aus Polystyrol mit 2 x 500 ml Plum Augenspülflaschen und innenseitigem Spiegel. Besonders für den Einsatz an Arbeitsplätzen geeignet, wo Fremdkörper in das Auge gelangen können. Die Flaschen werden sicher vor Staub und Schmutz geschützt. Einfache Montage.

Spülzeit:	ca. 10 Min.
Versandeinheit:	1 Stk.
Art.-Nr.:	4650
Maße:	H: 280 x B: 230 x T: 110 mm
PZN:	4397448

BEHEIZBARE AUGENSPÜLWANDBOX

Mit einem integrierten Heizelement wird der Einsatz der Augenspülflaschen auch im Niedrigtemperaturbereich und bei Frost möglich. Nähere Informationen hierzu auf Anfrage.

Spülzeit:	ca. 10 Min.
Versandeinheit:	1 Stk.
Art.-Nr.:	4649
Maße:	H: 280 x B: 230 x T: 110 mm



PLUM AUGENSPÜLSTATION

Wandstation mit 1 x 500 ml Plum Augenspülflasche, Wandhalterung und beiliegenderm Piktogramm. Besonders für eine jederzeit schnell verfügbare Augenspülung an kleineren Arbeitsplätzen geeignet. Einfache Montage.

Spülzeit:	ca. 5 Min.
Versandeinheit:	1 Stk.
Art.-Nr.:	4611
Maße:	H: 300 x B: 170 x T: 80 mm
PZN:	4397425



PLUM AUGENSPÜLSTATION MAXI

Wandstation mit 2 x 1000 ml Plum Augenspülflaschen, Wandhalterung und Piktogramm mit Spiegel. Die Station ermöglicht eine Spülzeit von insgesamt ca. 20 Minuten und ist besonders für den Einsatz an Arbeitsplätzen geeignet, wo eine längere Spülzeit erforderlich ist. Einfache Montage.

Spülzeit:	ca. 20 Min.
Versandeinheit:	1 Stk.
Art.-Nr.:	4708
Maße:	H: 375 x B: 26 x T: 95 mm
PZN:	3128893



PLUM AUGENSPÜLSTATION

Wandstation mit 2 x 500 ml Plum Augenspülflaschen, Wandhalterung, integriertem Piktogramm und Spiegel. Speziell entwickelt für Arbeitsplätze, wo eine längere Spülzeit erforderlich ist. Einfache Montage.

Spülzeit:	ca. 10 Min.
Versandeinheit:	1 Stk.
Art.-Nr.:	4694
Maße:	H: 290 x B: 228 x T: 80 mm
PZN:	4397431





Optimaler Schutz

Mit unseren Notfallstationen sind Sie optimal abgesichert – sowohl gegen Unfälle mit Fremdkörpern als auch gegen Schäden durch Säuren und Alkali

Plötzlich löst sich ein Schlauch oder ein Rohr platzt. Dadurch können chemische Substanzen austreten und in das Auge spritzen. Nun zählen Sekunden, um das Augenlicht des Mitarbeiters zu retten.

PLUM AUGENSPÜLUNG SINNVOLLE ERGÄNZUNG FÜR PH NEUTRAL

Bei Augenunfällen durch Säuren oder Alkali empfehlen wir eine kombinierte Spülung.

Zuerst wird als Erste-Hilfe Maßnahme mit pH Neutral neutralisiert und anschließend sollte die Spülung mit Plum Augenspülung auf dem Weg zum Arzt fortgesetzt werden. Wir haben deshalb eine Auswahl von Notfallstationen zusammengestellt, die dieser Empfehlung gerecht werden.

Sollten Sie vermehrt mit flüssigen Schadstoffen arbeiten, empfehlen wir den Einsatz unserer pH Neutral DUO mit der Sie im Notfall gleichzeitig beide Augen spülen können. Beachten Sie, dass Sie mit unserer Notduschestation (4741) Säuren und Alkali auf der Haut neutralisieren können.



200 ML PH NEUTRAL IM EINZELKARTON

Handliche Flasche mit steriler Phosphatpufferlösung (4.9 %) im geschützten Einzelkarton. Der robuste und praktische Einzelkarton lässt sich zur Entnahme der Flasche leicht und schnell öffnen. Für die schnelle Neutralisierung von Säuren und Alkali. Zur Nachfüllung der Augenspülstationen und für den mobilen Einsatz geeignet.

Spülzeit:	ca. 2 Min.
Versandeinheit:	10 Stk.
Art.-Nr.:	4755
Maße:	H: 58 x B: 58 x T: 163 mm
PZN:	11535394



QUICKCLEAN WUNDREINIGUNGSTÜCHER MIT WANDHALTERUNG

Praktische Wandhalterung mit 40 Stück Wundreinigungstüchern zur schnellen und hygienischen Reinigung kleinerer Wunden und Schnittverletzungen. Jedes Tuch ist einzeln abgepackt und enthält steriles Wasser. Zur Anbringung direkt am Arbeitsplatz. Maße der Tücher 130 x 200 mm.

Versandeinheit:	6 x 40 Stk.
Art.-Nr.:	5550
PZN:	9534163



ERSTE-HILFE STATION

Wandstation mit Plum Augenspülung, QuickFix Pflasterspender, QuickClean Wundreinigungstücher, Spiegel und Pikto-gramm.

INHALT:

1 x 500 ml Plum Augenspülung	
1 x 40 Stk. QuickClean Wundreinigungstücher	4604
1 Stk. QuickFix Pflasterspender mit 45 elastischen und 45 wasserfesten Pflastern	5551
	5507

Versandeinheit:	1 Stk.
Art.-Nr.:	5101
Maße:	H: 300 x B: 515 x T: 85 mm
Pflastergröße:	72 x 25 mm
PZN:	9534128



STATION MIT 1000 ML PH NEUTRAL

Wandstation mit 1.000 ml pH Neutral, für die schnelle Neutralisierung von Säuren und Alkali auf der Haut. Ausgestattet mit einem speziellen Sprühkopf, der eine gleichmäßige Verteilung der Flüssigkeit über eine große Körperfläche gewährleistet. Lässt sich an nahezu jedem gefährdeten Arbeitsplatz montieren und benötigt keinen Wasseranschluss. Lieferung mit Piktogramm und Staubkappe auf der Flasche.

Spülzeit:	ca. 2 Min.
Versandeinheit:	1 Stk.
Art.-Nr.:	4741
Maße:	H: 300 x B: 160 x T: 95 mm
PZN:	4397454



AUGEN-NOTFALLSTATION

Wandstation mit 200 ml pH Neutral und 500 ml Plum Augenspüllösung. Mit integriertem Piktogramm, Spiegel und beiliegendem Augen-Notfallplan. Besonders für den Einsatz an Arbeitsplätzen geeignet, wo Säuren oder Alkali sowie Fremdkörper in das Auge gelangen können.

Spülzeit:	pH Neutral ca. 2 Min. Plum Augenspüllösung ca. 5 Min.
Versandeinheit:	1 Stk.
Art.-Nr.:	4770
Maße:	H: 290 x B: 228 x T: 80 mm
PZN:	0622871



AUGEN-NOTFALLSTATION DUO

Wandstation mit 1 x 500 ml pH Neutral Duo und 1 x 1000 ml Plum Augenspüllösung Duo zum gleichzeitigen Spülen beider Augen. Besonders für den Einsatz an Arbeitsplätzen geeignet, wo Säuren und Alkali sowie Fremdkörper in das Auge gelangen können. Lieferung mit Spiegel und Piktogramm

Spülzeit:	pH Neutral ca. 2 Min. Plum Augenspüllösung ca. 5 Min.
Versandeinheit:	1 Stk.
Art.-Nr.:	4803
Maße:	H: 375 x B: 2350x T: 95 mm
PZN:	6134581



AUGEN-NOTFALLSTATION IN WANDBOX

Staubgeschützte Wandbox aus Polystyrol mit 200 ml pH Neutral und 500 ml Plum Augenspüllösung. Mit innenseitigem Spiegel. Lieferung inklusive Augen-Notfallplan. Besonders für den Einsatz an Arbeitsplätzen geeignet, wo Säuren oder Alkali sowie Fremdkörper in das Auge gelangen können und wo Staub und Schmutz anfallen.

Spülzeit:	pH Neutral ca. 2 Min. Plum Augenspüllösung ca. 5 Min.
Versandeinheit:	1 Stk.
Art.-Nr.:	4789
Maße:	H: 280 x B: 230 x T: 110 mm
PZN:	0622865

BEHEIZBARE AUSFÜHRUNG LIEFERBAR.
NÄHERE INFORMATIONEN AUF ANFRAGE

Art.-Nr.:	4664
------------------	------



PLUM COMBIBOX DUO

Staubgeschützte Wandbox aus Polystyrol mit 500 ml pH Neutral DUO und 500 ml Plum Augenspüllösung DUO mit innenseitigem Spiegel. Für die gleichzeitige Spülung beider Augen. Besonders für den Einsatz an Arbeitsplätzen geeignet, wo Säuren oder Alkali sowie Fremdkörper in das Auge gelangen können und wo Staub und Schmutz anfallen.

Spülzeit:	pH Neutral ca. 2 Min. Plum Augenspüllösung ca. 2 Min.
Versandeinheit:	1 Stk.
Art.-Nr.:	4862
Maße:	H: 280 x B: 230 x T: 110 mm
PZN:	11535365



AUGEN-NOTFALLSTATION DUO IN WANDBOX

Staubgeschützte Wandbox aus Polystyrol mit 500 ml pH Neutral DUO und 1000 ml Plum Augenspüllösung mit innenseitigem Spiegel. Für die gleichzeitige Spülung beider Augen. Besonders für den Einsatz an Arbeitsplätzen geeignet, wo Säuren oder Alkali sowie Fremdkörper in das Auge gelangen können und wo Staub und Schmutz anfallen.

Spülzeit:	pH Neutral ca. 2 Min. Plum Augenspüllösung ca. 5 Min.
Versandeinheit:	1 Stk.
Art.-Nr.:	4810
Maße:	H: 357 x B: 252 x T: 116 mm
PZN:	6585289



Quick FIX



QUICKFIX IST EIN EINZIGARTIGER SPENDER:

- Bietet sofortigen und sichtbaren Zugang zu Pflastern
- Löst die meisten Unfälle schnell, leicht und hygienisch
- Jedes Pflaster ist einzeln verpackt
- Lässt sich mit einer Hand bedienen
- Pflaster entpacken sich bei der Entnahme bereits von selbst
- Je nach Bedarf nachfüllbar
- Deutliche Anzeige bei leerem Spender
- Stoppt kleine Blutungen, auch ohne andere Pflaster zu beschmutzen
- Problemlose Anbringung aufgrund kleiner Abmessungen
- Eingebautes Regalfach zur Aufbewahrung von Kleinutensilien
- Wahlweise auch abschließbar mit beiliegendem Schlüssel



QUICKFIX ELASTIC

Pflasterspender inklusive 90 Stk. elastischen Textilgewebepflastern, die sich den Bewegungen der Haut anpassen und somit sehr angenehm zu tragen sind. Die Pflaster sind hautfreundlich und atmungsaktiv.

Versandeinheit: 1 Stk.
Art.-Nr.: 5502
Refill Art.-Nr.: 5512
Maße: H: 135 x B: 230 x T: 32 mm
Pflastergröße: L: 72 x B: 25 mm
PZN: 9534269



QUICKFIX WATER RESISTANT

Pflasterspender inklusive 90 Stk. wasserfesten Pflastern aus schützendem PE-Material. Besonders für feuchte Arbeitsbedingungen geeignet.

Versandeinheit: 1 Stk.
Art.-Nr.: 5501
Refill Art.-Nr.: 5511
Maße: H: 135 x B: 230 x T: 32 mm
Pflastergröße: L: 72 x B: 25 mm
PZN: 9534252



QUICKFIX ELASTIC & WATER RESISTANT

Pflasterspender inklusive 45 Stk. elastischen und 45 Stk. wasserfesten Pflastern für die verschiedenen Anforderungen am Arbeitsplatz.

Versandeinheit: 1 Stk.
Art.-Nr.: 5507
Refill Art.-Nr.: 5512 & 5511
Maße: H: 135 x B: 230 x T: 32 mm
Pflastergröße: L: 72 x B: 25 mm
PZN: 9534281

QuickFix für die schnelle Hilfe bei kleinen Zwischenfällen

Montieren Sie den Pflasterspender an der Wand und sparen Sie dadurch Zeit. Einfach Pflaster auf die Wunde auftragen und zurück zur Arbeit.

SCHNELLE UND HYGIENISCHE HILFE FÜR KLEINE WUNDEN

Alltäglich ereignen sich eine Vielzahl von kleinen Unfällen am Arbeitsplatz. Für die meisten Verletzungen ist ein Pflaster ausreichend und die Arbeit kann fortgesetzt werden.

Wählen Sie das richtige Pflaster für Ihren Arbeitsbereich. Oder eine Kombination. Mit den Plum Pflastern können sehr viele Arbeitsbereiche abgedeckt werden, z.B. feuchte Arbeitsumgebungen oder Lebensmittelbereiche. Lassen Sie sich nicht durch kleine Zwischenfälle aufhalten. Ziehen, auftragen und zurück zum Arbeitsplatz. QuickFix ist einfach, hygienisch und effektiv.



Ziehen Sie das Pflaster aus dem Spender. Das Pflaster ist sofort einsatzbereit...



...und kann mit einer Hand auf die Wunde aufgetragen werden



QUICKFIX DETECTABLE

Pflasterspender inklusive 90 Stk. blauen, atmungsaktiven Textilgewebepflastern mit integrierter Metallfläche, die sich mittels Metalldetektor aufspüren lassen. Besonders geeignet für die Lebensmittelindustrie.

Versandseinheit: 1 Stk.
Art.-Nr.: 5503
Refill Art.-Nr.: 5513
Maße: H: 135 x B: 230 x T: 32 mm
Pflastergröße: L: 72 x B: 25 mm
PZN: 9534275



QUICKFIX ELASTIC LONG

Pflasterspender mit 60 Stk. elastischen Fingerverbänden zum mehrfachen Herumwickeln um den Finger. Das elastische und atmungsaktive Trägermaterial passt sich den Bewegungen der Haut an und bietet einen hohen Anwendungskomfort. Für ein breites Spektrum an Schnittverletzungen und Wunden geeignet. Optimaler Halt auch bei starker Beanspruchung.

Versandseinheit: 1 Stk.
Art.-Nr.: 5528
Refill Art.-Nr.: 5508
Maße: H: 135 x B: 230 x T: 32 mm
Pflastergröße: L: 120 x B: 20 mm
PZN: 9534393

WÄHLEN SIE AUS DREI PFLASTERTYPEN UND ZWEI LÄNGEN

QUICKFIX ELASTIC

Elastisches, atmungsaktives Textilgewebepflaster, das sich den Bewegungen der Haut anpasst und somit angenehm zu tragen ist.

QUICKFIX WATER RESISTANT

Wasserfestes Pflaster aus schützendem PE-Material, das besonders für feuchte Arbeitsumgebungen geeignet ist.

QUICKFIX DETECTABLE

Optisch auffällige blaue, atmungsaktive Textilgewebepflaster mit integrierter Metallfläche, die sich mittels eines Metalldetektors aufspüren lassen. Besonders geeignet für den Einsatz im Lebensmittelbereich.

QUICKFIX LONG

Extra langes Pflaster, das sich mehrfach um den Finger herumwickeln lässt. Dadurch klebt es besonders gut und hält noch länger.



QUICKFIX DETECTABLE LONG

Pflasterspender mit 60 Stk. detektierbaren Fingerverbänden zum mehrfachen Herumwickeln um den Finger. Dank der integrierten Metallfläche sind die Pflaster durch Metalldetektoren aufspürbar. Optimale Haltbarkeit auch bei starken Beanspruchungen in hygienisch sensiblen Bereichen. Das elastische und atmungsaktive Trägermaterial passt sich den Bewegungen der Haut an und bietet einen hohen Anwendungskomfort.

Versandseinheit: 1 Stk.
Art.-Nr.: 5529
Refill Art.-Nr.: 5509
Maße: H: 135 x B: 230 x T: 32 mm
Pflastergröße: L: 120 x B: 20 mm
PZN: 9535292



QUICKFIX&RINSE

Spender mit 45 Stk. atmungsaktiven, elastischen Textilgewebepflastern und 5 Stk. Augenspülampullen mit je 20 ml steriler Natriumchloridlösung (0,9%) . Der Spender bietet schnelle, einfache und hygienische Erste-Hilfe bei kleinen Unfällen und die Möglichkeit, Pflaster sowie Augenspülung nach Bedarf zu kombinieren.

Versandereinheit:	1 Stk.
Art.-Nr.:	4631
Refill Art.-Nr.:	5502 & 5160
Maße:	H:190 x B:230 x T:32 mm
Pflastergröße:	72 x 25 mm
PZN:	10987875



QUICKRINSE

Spender mit 10 Stk. Augenspülampullen mit je 20 ml Natriumchloridlösung (0,9%). Der Spender bietet schnelle, einfache und hygienische Hilfe zum Ausspülen von Fremdkörpern aus dem Auge.

Versandereinheit:	1 Stk.
Art.-Nr.:	4632
Refill Art.-Nr.:	5160
Maße:	H:135x B:230 x T:32 mm
PZN:	10987881



QuickRinse für die kleineren Unfälle

Eine wirtschaftliche Lösung für die kleinen Unfälle

BENUTZEN SIE QUICKRINSE FÜR EINE KLEINE SPÜLUNG

Das Auge ist sehr empfindlich. Daher können auch kleinere Unfälle zu ernsthaften Schmerzen und Lichtempfindlichkeit führen. Die Lösung ist, den Fremdkörper aus dem Auge zu spülen. Manchmal ist aber eine 500 ml Flasche etwas zu viel Flüssigkeit und es reicht eine kleine Menge. Für diese Situation sollten Sie QuickRinse benutzen, um Staub oder Schmutz aus dem Auge zu spülen.


Bitte beachten Sie, dass Sie unsere QuickFix Pflaster ebenfalls bei Bedarf in den Spender einsetzen können.

Jederzeit griffbereit zur Hand

Praktische Lösungen - Schnelle Erste-Hilfe

IDEAL FÜR DEN MOBILEN EINSATZ

Unsere Pflaster und Augenspülampullen sind auch in kleinen, handlichen Verpackungsgrößen erhältlich. Die praktischen Spenderpackungen können z.B. im Werkzeugkasten, im Auto, im LKW, in der Jackentasche oder im Notfallkoffer mitgeführt werden und sind dadurch immer schnell zur Hand. So sind Sie gut auf die kleinen unangenehmen Überraschungen im Alltag vorbereitet.

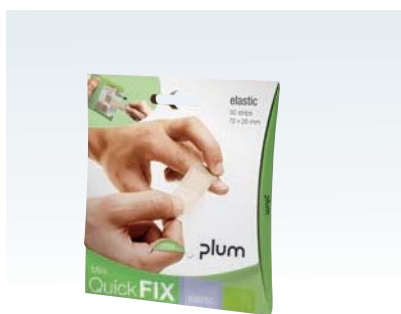

QUICKFIX MINI

Kleine und praktische Verpackung mit 30 Stk. elastischen Pflastern. Ideal zum Mitführen im Werkzeugkasten, im Handschuhfach, in der Jacken – oder Kitteltasche und auch im Notfallkoffer. Das elastische und atmungsaktive Trägermaterial passt sich den Bewegungen der Haut an und bietet einen hohen Anwendungskomfort. Alle Pflaster sind hygienisch einzeln verpackt. Sie entpacken sich bei der Entnahme von selbst und können sofort auf die Wunde aufgetragen werden.

Versandeinheit: 30 x 30 Stk.
Art.-Nr.: 5504
Pflastergröße: L: 72 x B: 25 mm
PZN: 9534298



QUICKRINSE MINI

Kleine und praktische Verpackung mit 4 Augenspülampullen mit jeweils 20 ml 0,9 % steriler Natriumchloridlösung. Die Ampullen bieten schnelle, einfache und hygienische Hilfe bei kleineren Irritationen im Auge durch Staub, Schmutz o.ä.. Durch die handliche Taschengröße kann die Verpackung bequem mitgeführt werden und ist so bei Bedarf jederzeit schnell griffbereit.

Versandeinheit: 5 x 4 Stk.
Art.-Nr.: 4619
PZN: 11029509



GÜRTELTASCHE FÜR 200 ML FLASCHEN

Die praktische Tasche kann am Gürtel befestigt werden und schützt die Flaschen vor äußeren Verschmutzungen. Im Erste-Hilfe Fall sehr leicht und schnell zu öffnen. Ausgestattet mit einem Klettverschluss und Kennzeichnung der Augenspüleinrichtung.

Versandeinheit: 10 Stk.
Art.-Nr.: 4692
PZN: 4397460



QuickSafe® bietet Ihnen schnelle, einfache und sichere Erste-Hilfe

Mit QuickSafe® gestalten Sie Ihre Erste-Hilfe übersichtlich und mit System.

HIER ERHALTEN SIE EINE MASSGESCHNEIDERTE ERSTE HILFE WANDSTATION

Stellen Sie sich Ihre Wandstation nach Bedarf zusammen. Augenspülung mit oder ohne pH Neutral. Pflaster, die Ihrer Arbeitssituation entsprechen. Wundreinigungstücher zur Reinigung von kleinen Wunden. Verbrennungsgel für die Erste-Hilfe bei kleineren Verbrennungen. Augenspülampullen für kleine Irritationen im Auge. Wundverband mit Kompressen, um Blutungen zu stoppen.

” DIE WICHTIGSTEN ERSTE-HILFE UTENSILIEN AN EINEM PLATZ

Spæncom A/S ist ein führender Anbieter von Betonelementen. Für die Augensicherheit der über 500 Mitarbeiter hat man sich für die QuickSafe® Box von Plum entschieden. “Wir haben uns für die QuickSafe® Box entschieden, da wir den Bedarf an Erste-Hilfe Produkten an die einzelnen Arbeitsplätze anpassen können. In den Bereichen, in denen wir Betonelemente mit Chemikalien behandeln, können wir Plum Augenspülflaschen und pH Neutral platzieren. QuickSafe® beinhaltet die wichtigsten Produkte. Wir haben somit alles griffbereit zur Hand und der transparente Deckel macht es sehr übersichtlich.”
Jany Johannsen, Umwelt- und Sicherheitskoordinator





QuickSafe® EMPT Y

HIER KÖNNEN SIE SELBST BESTIMMEN

Wenn Sie Ihren Bedarf an Erste-Hilfe Artikeln selber bestimmen möchten, starten Sie mit einer leeren Wandstation und befüllen Sie diese exakt nach Ihren Wünschen.



KAUFEN SIE EINE STATION UND BEFÜLLEN SIE DIESE NACH BEDARF

Sie starten mit einer Wandstation und befüllen diese mit Augenspülflaschen und anderen Erste-Hilfe Produkten. Selbstverständlich können Sie sich auch für eine der vier kundenspezifischen QuickSafe® Lösungen entscheiden, die wir auf den nächsten Seiten präsentieren.

Versandereinheit:	1 Stk.
Art.-Nr.:	5173
Maße:	H: 430 x B: 253 x T: 92 mm
PZN:	10066371



SCANNEN SIE DEN CODE ODER GEHEN SIE AUF WWW.PLUM-QUICKSAFE.DE, UM ZU SEHEN, WIE LEICHT UND FLEXIBEL ERSTE HILFE SEIN KANN.



Erste-Hilfe griffbereit an einem Platz

Leichte Zugänglichkeit ermöglicht höhere Sicherheit

QuickSafe® ist eine moderne Systemlösung, die die wichtigsten Erste-Hilfe Produkte griffbereit an einem Platz vereint.

Der transparente Klappdeckel sorgt für Überblick und schnellen, leichten Zugriff. Nachfüllbedarf ist sofort zu erkennen. Mit einem staubgeschützten Gehäuse und einzeln verpackten Produkten ist QuickSafe® eine hygienische und praktische Lösung.





QuickSafe® BASIC

EIN GUTER AUSGANGSPUNKT

Mit der QuickSafe® Basic können Sie selbst entscheiden mit welchen Produkten Sie die oberen Fächer befüllen möchten. Damit haben Sie vollständige Flexibilität.



HABEN SIE SPEZIELLE ANFORDERUNGEN AN IHRE ERSTE-HILFE WANDSTATION?

Kern des gesamten QuickSafe® Programms sind unsere bewährten Augenspüllösungen. QuickSafe® Basic ist bestückt mit Plum Augenspülung, pH Neutral, Augenspülampullen und Pflastern. Die Bestückung der oberen Fächer können Sie selbst festlegen und so den Bedürfnissen an Ihren Arbeitsplatz anpassen.

INHALT:	Art.-Nr.
2 x 500 ml Plum Augenspülung	4604
1 x 200 ml pH Neutral	4752
5 x 20 ml QuickRinse Augenspülampullen	5160
1 x QuickFix Refill mit 45 elastischen Pflastern	5512

Versandereinheit:	1 Stk.
Art.-Nr.:	5170
Maße:	H: 430 x B: 253 x T: 92 mm
PZN:	10066342



QuickSafe® COMPLETE

DIE KOMPLETTE LÖSUNG

Augenspülung inklusive pH Neutral und Augenspülampullen, Wundverband mit Kompressen, Wundreinigungstücher, Pflaster und Verbrennungsgel für die Erste-Hilfe bei kleineren Verbrennungen.



SCHNELLE HILFE IST DOPPELTE HILFE

QuickSafe® Complete ist mit einer breiten Palette an Erste-Hilfe Produkten bestückt. Eine gute All-round-Lösung, die in den meisten Situationen hilft.

INHALT:	Art.-Nr.
18 x QuickCool Verbrennungsgel	5150
1 x QuickStop Wundverband Set:	5152
1 Komresse 17 x 17 cm und	
2 Kompressen 12 x 7,5 cm	
20 x QuickClean Wundreinigungstücher	5151
2 x 500 ml Plum Augenspülung	4604
1 x 200 ml pH Neutral	4752
5 x 20 ml QuickRinse Augenspülampullen	5160
1 x QuickFix Refill mit 45 elastischen Pflastern	5512

Versandereinheit:	1 Stk.
Art.-Nr.:	5174
Maße:	H: 430x B 253 x T: 92 mm
PZN:	10066365



QuickSafe® FOOD INDUSTRY

FÜR LEBENSMITTELINDUSTRIE

Erste-Hilfe Wandstation mit relevantem Inhalt für den speziellen Bedarf in der Lebensmittelindustrie.



SCHNELLE UND SICHERE HILFE

Eine Erste-Hilfe Wandstation speziell für Lebensmittelbetriebe, Küchen, Kantinen und Restaurants. Einschließlich blauer, detektierbarer Pflaster, Wundreinigungstücher, Verbrennungsgel und Wundverband-Set.

INHALT:	Art.-Nr.
18 x QuickCool Verbrennungsgel	5150
1 x QuickStop Wundverband Set:	5152
1 Komresse 17 x 17 cm und	
2 Kompressen 12 x 7,5 cm	
20 x QuickClean Wundreinigungstücher	5151
2 x 500 ml Plum Augenspülung	4604
1 x 200 ml pH Neutral	4752
1 x QuickFix Refill mit 45 detektierbaren Pflastern	5513
1 x QuickFix Refill mit 30 detektierbaren Fingerverbänden	5509

Versandereinheit:	1 Stk.
Art.-Nr.:	5175
Maße:	H: 430 x B: 253 x T: 92 mm
PZN:	10181468



QuickSafe® CHEMICAL INDUSTRY

STARKE LÖSUNG FÜR CHEMISCHE SUBSTANZEN

Unfälle mit Säuren oder Alkali können schwerwiegende und lebenslange Folgen für den Verletzten mit sich bringen.



WENIGE SEKUNDEN KÖNNEN ENTSCHEIDEN

Bei einem Unfallrisiko, mit Säuren und Alkali in Kontakt zu kommen, ist das Vorhandensein von effektiven und mobilen Augenspüllösungen äußerst wichtig. Bestückt u.a. mit pH Neutral DUO zum gleichzeitigen Spülen beider Augen.

INHALT:	Art.-Nr.
1 x 500 ml Plum Augenspülung DUO	4861
1 x 500 ml pH Neutral DUO	4801
1 x 200 ml pH Neutral	4752
5 x 20 ml QuickRinse Augenspülampullen	5160
1 x QuickFix Refill mit 45 elastischen Pflastern	5512

Versandereinheit:	1 Stk.
Art.-Nr.:	5171
Maße:	H: 430 x B: 253 x T: 92 mm
PZN:	10066359





QUICKSTOP

Steriles Wundverband Set mit integrierten Kompressen. Elastisch, nicht klebend und hautfreundlich. QuickStop ist als Druck-, Deck- und Stützverband universell einsetzbar. Bei stärkeren Blutungen können die kleinen Wundverbände als zusätzliche Komresse verwendet werden.

Inhalt:

1 Stk. Wundverband mit Komresse
17x17cm

2 Stk. Wundverband mit Kompressen
12x7,5 cm

Versandereinheit: 6 x 3 Stk.
Art.-Nr. 5152
PZN: 10066313



QUICKCLEAN WUNDREINIGUNGSTÜCHER

Box mit 40 Stück Tüchern für die Wundreinigung. Jedes Tuch ist einzeln abgepackt und enthält steriles Wasser. Für den Einzeleinsatz und als Refillbox für die Wandhalterung geeignet. Maße der Tücher 130 x 200 mm

Versandereinheit: 11 x 40 Stk.
Art.-Nr. 5551
PZN: 9534217



QUICKCLEAN

20 Wundreinigungstücher zur Reinigung von kleineren Wunden und Schnittverletzungen. Jedes Tuch ist einzeln verpackt und enthält steriles Wasser. Zum Einzeleinsatz oder zur Nachfüllung der QuickSafe Box geeignet.

Versandereinheit: 6 x 20 Stk.
Art.-Nr. 5151
PZN: 10066307



QUICKCOOL

18 Sachets mit Verbrennungsgel für die Erste Hilfe bei kleineren Verbrennungen und Verbrühungen. Wirkt kühlend und schmerzlindernd. Enthält Teebaumöl. Zum Einzeleinsatz oder zur Nachfüllung der QuickSafe Box.

Versandereinheit: 6 x 18 Stk.
Art.-Nr.: 5150
PZN: 10066299

Übersicht der Refills

Achten Sie auf die Nachbestückung

Unser Produktsortiment ist flexibel und passt sich Ihrem Bedarf an. Mit den Refills können Sie die QuickSafe® Box und die QuickFix Systeme einfach und unkompliziert nachbestücken.

Sollten sich die Anforderungen am Arbeitsplatz geändert haben, können Sie individuell und flexibel auch andere Refills einsetzen.



QUICKFIX WATER RESISTANT REFILL

45 Stk. wasserfeste Pflaster, besonders für feuchte Arbeitsumgebungen geeignet. Die Pflaster sind aus schützendem PE-Material hergestellt.

Versandereinheit: 6 x 45 Stk.
Art.-Nr.: 5511
Pflastergröße: L: 72 x B: 25 mm
PZN: 9534335



QUICKFIX ELASTIC REFILL

45 Stk. elastische Textilgewebepflaster, die sich den Bewegungen der Haut anpassen und somit sehr angenehm zu tragen sind. Die Pflaster sind besonders atmungsaktiv

Versandereinheit: 6 x 45 Stk.
Art.-Nr.: 5512
Pflastergröße: L: 72 x B: 25 mm
PZN: 9534312



QUICKFIX DETECTABLE REFILL

45 Stk. optisch auffällige blaue Pflaster mit integrierter Metallfläche, die sich mittels eines Metalldetektors aufspüren lassen. Die Pflaster sind aus atmungsaktivem Textil-Material hergestellt.

Versandereinheit: 6 x 45 Stk.
Art.-Nr.: 5513
Pflastergröße: L: 72 X B: 25 mm
PZN: 9534341



QUICKFIX ELASTIC LONG REFILL

30 Stk. elastische Fingerverbände zum mehrfachen Herumwickeln um den Finger. Das elastische und atmungsaktive Trägermaterial passt sich den Bewegungen der Haut an und bietet einen hohen Anwendungskomfort.

Versandereinheit: 6 x 30 Stk.
Art.-Nr.: 5508
Pflastergröße: L: 120 x B: 20 mm
PZN: 9535300



QUICKFIX DETECTABLE LONG REFILL

30 Stk. optisch auffällige blaue detektierbare Fingerverbände mit integrierter Metallfläche, die sich mittels Metalldetektor aufspüren lassen. Besonders für die Lebensmittelindustrie geeignet. Die langen Fingerverbände lassen sich mehrfach um den Finger herumwickeln.

Versandereinheit: 6 x 30 Stk.
Art.-Nr.: 5509
Pflastergröße: L: 120 x B: 20 mm
PZN: 9535323



QUICKRINSE REFILL

5 Stk. Augenspülpumpen mit 20 ml 0,9 % steriler Natriumchloridlösung zum Ausspülen von Staub, Schutz etc. Zur Nachfüllung der QuickSafe Box, QuickRinse und QuickFix&Rinse Spender.

Versandereinheit: 4 x 5 Stk.
Art.-Nr.: 5160
PZN: 10066336



Plum Deutschland GmbH
Norden am Dorf 4a · 27476 Cuxhaven
Tel. 04721-681801 · Fax 04721-681802
info@plum-deutschland.de
www.plum-deutschland.de

plum



Plum Augenspülung - Produktinformation

Beschreibung

Die Plum Augenspülflaschen enthalten eine sterile 0,9 % Natriumchloridlösung, die dem natürlichen Salzgehalt des Auges entspricht. Die gut verträgliche und isotonische Flüssigkeit ist zur Anwendung als Erste-Hilfe Maßnahme für die Spülung der Augen vorgesehen. Das Produkt ist mit einer ergonomisch geformten Augenschale ausgestattet und ermöglicht einen gleichmäßigen und weichen Sprühstrahl. Die Flasche soll beim Spülvorgang leicht zusammengedrückt werden. In der DUO Ausführung ist ein Augenaufsatz zum gleichzeitigen Spülen beider Augen für besonders gefährdete Arbeitsbereiche erhältlich. Es handelt sich um ein Medizinprodukt gemäß der EU-Richtlinie 93/42/EWG. Ein Sicherheitsdatenblatt ist erhältlich.



Einsatzbereich

Die Plum Augenspüllösung wird zum Entfernen bzw. Herausspülen von Fremdkörpern bei mechanischen Verletzungen, verursacht z.B. durch Metall- und Holzsplitter, Schmutz, Staub sowie auch Chemikalien (z. B. Öle und Lösemittel), eingesetzt. Durch eine sofortige Spülung soll verhindert werden, dass sich die Fremdkörper im Auge festsetzen und schwere Augenschäden auftreten. Bei Verätzungsgefahr durch Säuren und Alkali empfehlen wir unsere sterile Spüllösung pH Neutral mit 4,9 % Phosphatpufferlösung (Produktspezifikation erhältlich), um einen Neutralisierungseffekt zu erreichen. Die Plum Augenspüllösung wird auch zur Fortsetzung der Spülung nach der Anwendung von pH Neutral empfohlen. Hinweis: Ärztlicher Rat ist bei jeder Augenverletzung einzuholen.



Augen-Notfallplan

SCHMUTZ- UND SCHADSTOFFEINWIRKUNG	EMPFOHLENE SPÜLLÖSUNG	FORTSETZUNG DER SPÜLUNG BIS ZUR ÄRZTLICHEN BEHANDLUNG	EMPFOHLENE SPÜLUNG
Fremdkörper (z. B. Staub, Schmutz, Metall- und Holzsplitter)	Plum Augenspüllösung	Plum Augenspüllösung	Augen solange spülen bis die Fremdkörper herausgespült sind.
Säureschäden	pH Neutral	Plum Augenspüllösung	Augen mit pH Neutral 2 Minuten spülen bis die Flasche entleert ist. Die Spülung mit der Plum Augenspüllösung bis zur ärztlichen Behandlung fortsetzen.
Alkalische Schäden	pH Neutral	Plum Augenspüllösung	Augen mit pH Neutral 2 Minuten spülen bis die Flasche entleert ist. Die Spülung mit der Plum Augenspüllösung bis zur ärztlichen Behandlung fortsetzen.
Sonstige Schäden (z.B. Lösemittel und Öle)	Plum Augenspüllösung	Plum Augenspüllösung	Augen solange spülen bis das unangenehme Gefühl nicht mehr spürbar ist. Die Spülung bis zur ärztlichen Behandlung fortsetzen.
Schäden auf der Haut durch Säuren, Alkali und Chemikalien	pH Neutral	Plum Augenspüllösung	Haut mit pH Neutral 2 Minuten spülen bis die Flasche entleert ist. Die Spülung mit der Plum Augenspüllösung bis zur ärztlichen Behandlung fortsetzen.

Unser Augen-Notfallplan erleichtert die Gefährdungsanalyse in Ihrem Betrieb und zeigt Ihnen leicht und übersichtlich, wie eine Spülung bei den unterschiedlichen Schmutz- und Schadstoffeintritten von uns empfohlen wird.

Plum Augenspülung - Produktinformation



Ihre Vorteile beim Einsatz

- Hohe Funktionssicherheit - die Flaschen entsprechen der DIN EN 15154-4 (Augenduschen ohne Wasseranschluss)
- Flexible Systemlösung - in verschiedenen Flaschengrößen und Stationen für den Einzeleinsatz sowie für die Wandmontage an den direkt gefährdeten Arbeitsplätzen lieferbar.
- Für nahezu jeden Einsatzbereich (z.B. Industrie, Werkstatt, Labor, Erste-Hilfe-Kasten, Mitführen in Fahrzeugen u.a.) geeignet.
- Schnell und leicht mit nur zwei Handgriffen zu verwenden - dadurch auch ohne fremde Hilfe von dem Verletzten selbst zu bedienen.
- Lange Haltbarkeit - ungeöffnet 3 Jahre haltbar und einsetzbar.
- Wartungsfrei - keine zusätzliche Reinigung sowie Austausch der Flüssigkeit wie bei herkömmlichem Wasser erforderlich.

Anwendung



Nehmen Sie die Flasche aus der Station.



Drehen Sie die Augenschale bis die Versiegelung bricht.



Den Kopf zurücklehnen und spülen.



Den Kopf nach vorne beugen und spülen wenn Ihre Kleidung nicht nass werden soll.

Hinweise zur Handhabung

Produkt zur einmaligen Benutzung. Nach Ablauf des Verfalldatums (s. Flaschenetikett) nicht mehr einsetzen. Die Versiegelung der Flasche muß unversehrt sein, um eine einwandfreie Handhabung zu gewährleisten. Bei Wiederverwendung von angebrochenen Flaschen besteht ein Infektionsrisiko.

Flaschengrößen

Inhalt	200 ml	500 ml	1000 ml	500 ml Duo	1000 ml Duo
Art.-Nr.	4691	4604	4707	4861	4800
Spülzeit	ca. 2 Min.	ca. 5 Min.	ca. 10 Min.	ca. 2 Min. je Auge	ca. 5 Min. je Auge
Abmessungen	H 165 x ø 55 mm	H 220 x ø 75 mm	H 270 x ø 85 mm	H 220 x ø 75 mm	H 270 x ø 85 mm



Produktübersicht

Gesunde Haut mit System

plum



Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz

Hautpflege für jede Arbeitssituation

Seit nunmehr 45 Jahren produzieren wir hochwertige Hautschutz- und Hautpflegecremes, Handreiniger, Cremeseifen und moderne Spendersysteme von höchster Qualität für nahezu jeden gewerblichen Anwendungsbereich. Höchste Priorität legen wir hierbei auf schonende und gleichzeitig wirksame Produkte zur Reinigung und Pflege, damit die Gesundheit Ihrer Hände erhalten wird.

In Skandinavien nehmen wir eine führende Position im Markt ein. Unsere Produkte haben sich in all den Jahren in handwerklichen und industriellen Branchen bestens bewährt. Wir arbeiten kontinuierlich daran, unser Know-how zu erweitern und unsere Produktpalette den Bedürfnissen des Marktes anzupassen. So können wir Ihnen optimale Handhygiene-Konzepte anbieten, z.B. auch in der Lebensmittelindustrie, im Gesundheitssektor und anderen Bereichen und Institutionen, wo besondere Hygienevorschriften gegeben sind.

Umweltgerechte Produkte und Dokumentation

Wir legen größten Wert darauf, daß unsere Produkte und Verpackungen Umweltauforderungen und Qualitätsansprüchen mehr als nur gerecht werden. Plum A/S ist zertifiziert nach ISO 9001, ISO 14001 sowie ISO 13485. Dadurch ist eine gleichbleibend hohe Produktqualität jederzeit gewährleistet. Für jedes unserer Produkte haben wir ein EU-Sicherheitsdatenblatt erstellt, das auf unserer Internetseite zum Download für Sie bereit steht.

Optimale Handhygiene

Die wichtigste Aufgabe der Haut ist es, den Körper vor externen Einflüssen zu schützen. Um einen optimalen Schutz zu gewährleisten, muss die Haut jedoch gesund sein. Eine optimale Handhygiene besteht deshalb aus drei verschiedenen Schritten:

Hautschutz vor und während der Arbeit

- gezielt abgestimmt auf die Arbeitssituation

Handreinigung

- milde und zugleich effektive Seifen und Handreiniger

Hautpflege nach der Arbeit

- mit einem regenerierenden Effekt

Anhand der nachfolgenden Übersicht können Sie leicht die richtige Produktauswahl für die unterschiedlichsten Anwendungsgebiete und Arbeitssituationen finden. Hier werden die Einsatzbereiche Industrie und Werkstatt, Lebensmittelbranche und Gesundheitswesen aufgeführt.

Gern erstellen wir Ihnen auch einen individuellen Hautschutzplan, der direkt auf Ihren Betrieb und die verschiedenen Arbeitsbereiche abgestimmt ist.

Besuchen Sie auch unsere Website auf www.plum-deutschland.de. Dort erfahren Sie mehr über unser gesamtes Lieferprogramm.

Optimale Handhygiene

	Hautbelastungen/ Anwendungsbereiche	Hautschutz vor und während der Arbeit	Hautreinigung	Hautpflege nach der Arbeit
			Desinfektion	
Industrie und Werkstatt	Sehr starke Werkstatt- und Industrierverschmutzungen z. B. nicht wasseremulgierte Metallbearbeitungsöle	Plutect Olio	Plulux Profi Plum Extra Premium	Handy Creme Handy Plus Plutect Care
	Mittlere bis starke Werkstatt- und Industrie- verschmutzungen	Plutect Dual	Super Plum	
	Leichte Industrierverschmutzungen z. B. Staub und wassergemischte Arbeitsstoffe	Plutect Dual	Super Plum Plum No. 14 Plum Soft Fresh Nature	
	Ständige Arbeit mit wässrigen Arbeitsstoffen z. B. Ze- ment, Reiniger, Chemikalien und Säuren	Plutect Aqua	Plum No. 14 Plum Soft Fresh Nature	
	Stark haftende Arbeitsstoffe z. B. Lacke, Kleber, Epoxidharze, Druck- und Kopierfarben	Plutect Olio	Plulac	
	Spezielle Verschmutzungen z. B. Teer, Pech, Harze und Mehrkomponentenkleber	Plutect Olio	Plulac	
	Ständige Arbeit unter extrem niedrigen Temperaturen, z.B. im Winter oder in Kühlhäusern	Plutect Frost		
	Ständige Arbeit im Freien, bei der die Haut der Sonnen- einstrahlung ausgesetzt ist	Sun Cream		
Lebensmittelindustrie	Umgang mit Frischfleisch	Plutect Aqua Handy Mild	Plum Soft Nature	Handy Mild Handy Plus
	Umgang mit Lebensmitteln, die besonders strengen Hygienevorschriften unterliegen	Plutect Aqua Handy Mild	Disinfectant 85%	
	Ständiges Arbeiten mit Lebensmitteln in Wasser und/oder feuchten Bedingungen	Plutect Aqua Handy Mild	Plum Soft Nature	
	Umgang mit Lebensmitteln in verarbeitenden Prozessen aber ohne direkten Lebensmittelkontakt.	Plutect Dual Handy Mild	Disinfectant 70% Plum Soft Nature	
	Leichte Verschmutzungen	Plutect Dual Handy Mild	Plum Soft Nature	
Gesundheitswesen	Normales und häufiges Händewaschen bei der Patientenpflege	Handy Mild	Nature Mild	Handy Mild
	Sehr häufiges Händewaschen bei der Patientenpflege		Nature Mild	
	Häufiges Händewaschen bei trockener und belasteter Haut		Nature Mild	
	Händedesinfektion in Krankenhäusern/Kliniken		Disinfectant 85%	
	Händedesinfektion bei der Heim- und Krankenpflege etc.		Disinfectant 85%	
	Gewöhnliches tägliches Händewaschen		Nature Mild	
	Haar- und Körperwäsche		Nature Hair & Body 3in1 Hair & Body	

Hautschutz vor und während der Arbeit

Durch die Verwendung einer Hautschutzcreme vor und während der Arbeit können Sie dem Austrocknen Ihrer Haut vorbeugen und damit das Risiko, dass Schadstoffe tiefer in Ihre Haut eindringen, erheblich reduzieren. Gleichzeitig

erleichtern Sie dadurch die Reinigung der Haut nach der Arbeit. Die Creme sollte auf Ihre Arbeitssituation bzw. den Anwendungsbereich abgestimmt sein.

Hautschutzcremes vor und während der Arbeit

<p>Plutect Aqua</p>		<p>Verpackungsgröße 100 ml Tube 0,7 L bag-in-box</p> <p>Art.Nr. 2231 2204</p>	<p>Hautschutzcreme vor und während der Arbeit beim Umgang mit Wasser und wasserlöslichen Stoffen. Ohne Duftstoffe. Anwendung: Auf die sauberen und trockenen Hände auftragen.</p> <p>Spendertyp: MP2000, StandardPlum</p>
<p>Plutect Olio</p>		<p>Verpackungsgröße 100 ml Tube 0,7 L bag-in-box</p> <p>Art.Nr. 2331 2304</p>	<p>Hautschutzcreme vor und während der Arbeit beim Umgang mit Ölen, Fetten und nicht wasserlöslichen Stoffen. Ohne Duftstoffe. Anwendung: Auf die sauberen und trockenen Hände auftragen.</p> <p>Spendertyp: MP2000, StandardPlum</p>
<p>Plutect Dual</p>		<p>Verpackungsgröße 100 ml Tube 0,7 L bag-in-box</p> <p>Art.Nr. 2541 2503</p>	<p>Hautschutzcreme vor und während der Arbeit für wechselnde Arbeitsprozesse, d.h. beim Umgang mit sowohl wasserlöslichen als auch nicht wasserlöslichen Stoffen. Ohne Duftstoffe. Mit dem "Nordischen Schwan" ausgezeichnet. Anwendung: Auf die sauberen und trockenen Hände auftragen.</p> <p>Spendertyp: MP2000, StandardPlum</p>
<p>Plutect Frost</p>		<p>Verpackungsgröße 100 ml Tube</p> <p>Art.Nr. 2811</p>	<p>Hautschutzcreme für Hände, Gesicht und Haut bei Arbeiten unter extrem niedrigen Temperaturen. Anwendung: Ca. 15 Minuten vor dem Aufenthalt im Freien auf die saubere und trockene Haut auftragen.</p>
<p>Sun Cream SPF 15&30</p>		<p>Verpackungsgröße SPF 15 200 ml Tube SPF 30 200 ml Tube</p> <p>Art.Nr. 3002 3022</p>	<p>Sonnenschutzcreme ohne Parabene, Farb- und Duftstoffe. Schützt vor UV-A und UV-B Strahlen. Unterstützt die Hauterneuerung und hilft, die natürliche Hautbarriere aufrecht zu erhalten. Mit dem "Nordischen Schwan" ausgezeichnet. Anwendung: Mehrmals täglich auf die Haut auftragen.</p>



Desinfektion

Bei der Arbeit in hygienisch sensiblen Bereichen ist der Einsatz eines Handdesinfektionsmittels erforderlich, um Bakterien und Viren von der Haut zu entfernen.

Die Produkte sind nach pr EN 12054 und EN 1500 als Händedesinfektionsmittel geprüft.

Desinfektion

Disinfectant 70%, Gel



Verpackungsgröße	Art.Nr.
120 ml Flasche	3728
1,0 L PE-Beutel	3736
1,0 L bag-in-box	3720

Desinfektionsgel für die hygienische Händedesinfektion. Bietet wirksamen Schutz vor Bakterien. Für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie und hygienisch sensiblen Bereichen. Gut rückfettend durch Zusatz an Glycerin.

Spendertypen: CombiPlum, MP2000, StandardPlum

Disinfectant 85%, Gel



Verpackungsgröße	Art.Nr.
120 ml Flasche	3756
500 ml Pumpflasche	3754
1,0 L PE-Beutel	3766
1,0 L Flasche	3767

Desinfektionsgel für die hygienische Händedesinfektion. Bietet wirksamen Schutz vor Bakterien, Pilzen und Viren. Für den Einsatz in Krankenhäusern, Kliniken und hygienisch sensiblen Bereichen, wo besondere Hygienevorschriften gegeben sind. Gut rückfettend durch Zusatz an Glycerin.

Spendertyp: CombiPlum



Hautreinigung

Es ist von großer Bedeutung, dass die Haut restlos gereinigt wird – jeden Tag. Zum Reinigen sollten Sie jedoch milde und dennoch effektive Hautreinigungspräparate benutzen.

Cremeseifen für das gewöhnliche Händewaschen und ein auf das Schmutzproblem abgestimmtes Handreinigungsmittel zur Entfernung von stärkeren Verschmutzungen.

Handreiniger / Plum Wipes

Super Plum		Verpackungsgröße 250 ml Tube 1,4 L bag-in-box 3,0 L Dose	Art.Nr. 1015 1018 1043	Besonders milder Handreiniger in Pastenform. Zur Entfernung von mittleren bis starken Verschmutzungen. Basiert auf pflanzlichen Ölen, deshalb besonders hautschonend und auch für die empfindliche Haut gut geeignet. Anwendung: Auf die feuchten Hände einreiben und anschließend mit Wasser abspülen. Spendertyp: MP2000, StandardPlum
Plulux		Verpackungsgröße 250 ml Tube 1,4 L bag-in-box	Art.Nr. 0715 0718	Handreiniger in Pastenform. Hautschonend durch Zusatz von pflanzlichen Ölen. Entfernt hartnäckige und haftende Grobverschmutzungen wie z. B. Kleber und Harze. Anwendung: Auf die feuchten Hände einreiben und anschließend mit Wasser abspülen. Spendertyp: MP2000, StandardPlum
Premium		Verpackungsgröße 250 ml Tube 1,4 L bag-in-box	Art.Nr. 0615 0618	Besonders hautschonender Handreiniger in Pastenform zur Entfernung von starken Verschmutzungen. Enthält als Reibemittel ein Maiskolbengranulat. Ohne Lösemittel und ohne Farbstoffe. Leicht schäumend und parfümiert. Biologisch sehr leicht abbaubar und mit dem "Nordischen Schwan" ausgezeichnet. Anwendung: Auf die feuchten Hände einreiben und anschließend mit Wasser abspülen. Spendertyp: MP2000, StandardPlum
Profi		Verpackungsgröße 250 ml Tube 1,4 L bag-in-box 5,0 L Kanister	Art.Nr. 0915 0918 0903	Hochleistungsreiniger in Pastenform. Entfernt hartnäckigste Grobverschmutzungen wie z. B. Diesel- und Hydrauliköle und Gemische aus Öl, Ruß und Metallabrieb. Anwendung: Auf die feuchten Hände einreiben und anschließend mit Wasser abspülen. Spendertyp: MP2000, StandardPlum
Plum Extra		Verpackungsgröße 250 ml Tube 4,2 L bag-in-box	Art.Nr. 0995 0984	Moderner Handreiniger mit sehr guten Reinigungseigenschaften und einem frischen Duft von Zitrusfrucht. Entfernt hartnäckigste Grobverschmutzungen wie z. B. Diesel- und Hydrauliköle, Gemische aus Öl, Metallabrieb und haftende Verschmutzungen. Anwendung: Auf die feuchten Hände einreiben und anschließend mit Wasser abspülen. Spendertyp: MaxiPlum
Plulac		Verpackungsgröße 250 ml Tube 1,4 L bag-in-box	Art.Nr. 0815 0818	Spezialhandreiniger in Pastenform. Entfernt Lacke, Ölfarben, Harze, Klebstoffe und andere stark haftende Verschmutzungen. Anwendung: Auf die feuchten Hände einreiben und anschließend mit Wasser abspülen. Spendertyp: MP2000, StandardPlum
Plum Wipes		Verpackungsgröße 50 Stück/Box 150 Stück/Eimer 200 Stück/Eimer Wandhalter für Box Wandhalter für Eimer 50 Stück/Box 150 Stück/Eimer	Art.Nr. 5330 5331 5332 5340 5342 1251 1252	Heavy-Duty Entfernt wirksam und schonend Öle, Metallabrieb, Fette, Farben, Kleber und sonstige hartnäckige Verschmutzungen ohne Einsatz von Wasser. Enthält eine wirksame Reinigungsflüssigkeit mit guter Rückfettung und zusätzlichem Reibeeffekt. All-Purpose Entfernt wirksam und schonend Öle, Wachse, Farben und sonstige Verschmutzungen ohne Einsatz von Wasser. Enthält eine wirksame Reinigungsflüssigkeit mit guter Rückfettung, jedoch ohne Reibeeffekt. Hand&Tool Reinigungstücher mit Reibeeffekt zur schnellen und effektiven Reinigung von Händen, Werkzeugen ohne Einsatz von Wasser. Die milde Reinigungsflüssigkeit basiert auf Wasser und Tensiden. Ohne Lösemittel, Farb- und Duftstoffe - daher auch für die empfindliche Haut geeignet.

Schaumseifen / Cremeseifen

Foam Sensitive		Verpackungsgröße 0,8 L PE-Beutel Art.Nr. 1308	Extra milde und hautfreundliche Schaumseife mit sanftem und weichem Schaum. Ohne Farb- und Duftstoffe. Mit dem „Nordischen Schwan“ ausgezeichnet. Inhalt reicht für ca. 2000 Anwendungen.  Spendertyp: CombiPlum Foam
Foam Luxury		Verpackungsgröße 0,8 L PE-Beutel Art.Nr. 1338	Milde und hautfreundliche Schaumseife mit sanftem und weichem Schaum. Ohne Farbstoffe, jedoch mit frischem Duft. Mit dem „Nordischen Schwan“ ausgezeichnet. Inhalt reicht für ca. 2000 Anwendungen.  Spendertyp: CombiPlum Foam
Plum No. 14		Verpackungsgröße 1,4 L bag-in-box 5,0 L Kanister Art.Nr. 1413 1403	Cremeseife, gut rückfettend und leicht parfümiert für die alltägliche Universalreinigung in Toiletten, Büros und Industriebereichen mit leichten Verschmutzungen. Ohne Konservierungsmittel. Spendertyp: MP2000, StandardPlum
Plum Soft		Verpackungsgröße 1,4 L bag-in-box Art.Nr. 1494	Cremeseife für die Universalreinigung in Toiletten, Büros und Industriebereichen mit leichten Verschmutzungen – mit dem „Nordischen Schwan“ ausgezeichnet. Ohne Farb- und Duftstoffe sowie Konservierungsmittel.  Spendertyp: MP2000, StandardPlum
Nature		Verpackungsgröße 0,5 L PE-Beutel 1,0 L PE-Beutel 1,4 L bag-in-box Art.Nr. 1785 1786 1795	Milde und besonders umweltschonende Cremeseife - mit dem „Nordischen Schwan“ ausgezeichnet. Für gewöhnliches und häufiges Händewaschen. Ohne Farb- und Duftstoffe.  Spendertypen: CombiPlum, MP2000, StandardPlum
Mild		Verpackungsgröße 1,4 L bag-in-box 0,45 L PE-Beutel Quadrant Art.Nr. 1667 1668	Extra milde und sehr hautfreundliche Cremeseife ohne Farb- und Duftstoffe. Speziell geeignet für besonders häufiges Händewaschen und für die Intimpflege. Sehr gut einsetzbar im Gesundheitssektor und in anderen Institutionen, bei denen spezielle Anforderungen an die Hygiene gestellt werden. Mit dem „Nordischen Schwan“ ausgezeichnet.  Spendertypen: MP2000, StandardPlum, Quadrant
Fresh		Verpackungsgröße 500 ml Pumpflasche 0,5 L PE-Beutel 1,0 L PE-Beutel 1,4 L bag-in-box 0,45 L PE-Beutel Quadrant Art.Nr. 1634 1635 1636 1637 1639	Gut rückfettende Cremeseife, leicht parfümiert und pH-neutral – mit dem „Nordischen Schwan“ ausgezeichnet. Für das alltägliche Händewaschen.  Spendertypen: CombiPlum, MP2000, StandardPlum, Quadrant
Nature Hair & Body		Verpackungsgröße 500 ml Pumpflasche 1,0 L PE-Beutel 1,4 L bag-in-box 4,2 L bag-in-box Art.Nr. 1733 1736 1737 1732	Mildes und umweltschonendes Shampoo für Haar, Körper und normales Händewaschen - mit dem „Nordischen Schwan“ ausgezeichnet. Leicht parfümiert. Ohne Farbstoffe.  Spendertypen: CombiPlum, MP2000, MaxiPlum, StandardPlum
3in1 Hair & Body		Verpackungsgröße 1,4 L bag-in-box Art.Nr. 1504	Gut schäumende, moderne Cremeseife für Haar, Körper und normales Händewaschen. Der intensive Schaum sorgt für weiche und zarte Haut sowie geschmeidiges Haar. Leicht parfümiert. Spendertyp: MP2000, StandardPlum

Hautpflege nach der Arbeit

Durch die Anwendung einer Hautpflegecreme nach der Arbeit kann Ihre Haut den natürlichen Feuchtigkeits- und Fettgehalt wieder aufbauen. Die Haut wird wieder weich, geschmeidig und widerstandsfähiger und ist somit auf neue äußere

Einwirkungen gut vorbereitet. Sinnvoll ist auch der Gebrauch einer Hautpflegecreme im Laufe des Arbeitstages, wenn die Haut durch die tägliche Arbeit sehr stark beansprucht wird.

Hautpflegecremes nach der Arbeit

Handy Creme		Verpackungsgröße 100 ml Tube 0,7 L bag-in-box	Art.Nr. 2461 2470	Hautregenerierende Pflegecreme für die trockene und empfindliche Haut. Ohne Duftstoffe. Anwendung: Auf die sauberen und trockenen Hände auftragen. Spendertyp: MP2000, StandardPlum
Handy Mild		Verpackungsgröße 100 ml Tube 0,5 L PE-Beutel	Art.Nr. 2531 2535	Hautregenerierende Pflegecreme für die normale und trockene Haut. Ohne Duftstoffe. Mit dem "Nordischen Schwan" ausgezeichnet.  Anwendung: Auf die sauberen und trockenen Hände auftragen. Spendertyp: CombiPlum
Handy Plus		Verpackungsgröße 50 ml Tube 200 ml Tube 0,5 L PE-Beutel 0,7 L bag-in-box	Art.Nr. 2902 2901 2935 2903	Hautregenerierende Pflegecreme, die schnell in die Haut einzieht. Für die normale und trockene Haut. Leicht parfümiert. Anwendung: Auf die sauberen und trockenen Hände auftragen. Spendertypen: CombiPlum, MP2000, StandardPlum
Plutect Care		Verpackungsgröße 250 ml Tube 1,0 L bag-in-box	Art.Nr. 2965 2963	Milde und wirksame Hautpflegecreme zur Anwendung vor, während und nach der Arbeit. Fördert die natürliche Schutzfunktion der Haut. Mit dem "Nordischen Schwan" ausgezeichnet.  Anwendung: Auf die sauberen und trockenen Hände auftragen. Spendertyp: MP2000, StandardPlum

Flexible Spendersysteme

Zugänglichkeit ist das Schlüsselwort. Und unsere Spendersysteme sind die Antwort. Die Produkte müssen dort zur Verfügung stehen, wo sie benötigt werden. Das können wir mit unseren Spendersystemen gewährleisten. Die robusten Spender sind für die Dosierung von ein bis zu zwei Produkten geeignet und bieten somit eine große Flexibilität.

Damit können Sie die Produktauswahl auf Ihre individuellen Bedürfnisse optimal abstimmen. Unsere Spender sind gemäß der folgenden Übersicht in unterschiedlichen Größen und Ausstattungen lieferbar. Wir gewähren auf alle Spender eine unbeschränkte Garantie bei sachgemäßem Gebrauch.

Flexible Spendersysteme

<p>MP 2000</p>		<p>Verpackung MP 2000 Modul 1 MP 2000 Modul 2</p>	<p>Art.Nr. 4251 4252</p> <p>Flexibles, hygienisches und betriebssicheres Spendersystem mit robustem, rauchfarbigem Polycarbonatgehäuse. Das System ist durch die Modulbauweise in zwei unterschiedlichen Größen erhältlich. Sämtliche Produkte können kombiniert und dosiert werden. Die Produkte für das MP 2000 System sind in umweltgerechten, luftdichten 0,7 L, 1,0 L oder 1,4 L bag-in-box Verpackungen erhältlich.</p> <p>Modul 1: Maße: H: 300 x B: 130 x T: 110 mm Modul 2: Maße: H: 300 x B: 230 x T: 110 mm</p>
<p>Standard Plum</p>		<p>Verpackung Schwarz transparent</p>	<p>Art.Nr. 4215</p> <p>Hygienisches und stabiles Spendersystem mit schwarz transparentem Außengehäuse aus ABS-Kunststoff. Die Produkte für das StandardPlum Spendersystem werden in umweltgerechten und luftdichten 0,7 L, 1,0 L oder 1,4 L bag-in-box Verpackungen geliefert.</p> <p>Maße: H: 285 x B: 117 x T: 122 mm</p>
<p>MaxiPlum</p>		<p>Verpackung Schwarz transparent</p>	<p>Art.Nr. 4221</p> <p>Hygienisches und stabiles Spendersystem mit schwarzem Außengehäuse aus ABS-Kunststoff. Die Produkte für das MaxiPlum System werden in umweltgerechten und luftdichten 4,2 L bag-in-box Verpackungen geliefert. Besonders sparsam im Verbrauch und für den Einsatz an Arbeitsplätzen mit hohem Verbrauch gut geeignet.</p> <p>Maße: H: 340 x B: 175 x T: 175 mm</p>

Automatische Dosierung und berührungslose Bedienung

Ein schneller Zugang zu Seife und Desinfektion ermöglicht eine bessere und effektivere Handhygiene und sorgt so für einen niedrigeren Krankenstand.

Das Design des CombiPlum Electronic ist nicht nur zeitlos und modern, sondern setzt auch im Bereich Funktionalität neue Standards. Der Spender ist vielseitig einsetzbar und daher für den Einsatz in unterschiedlichen industriellen Bereichen,

Krankenhäusern, Lebensmittelbetrieben sowie auch in Büros und öffentlichen Toiletten geeignet.

Der CombiPlum Electronic Spender kann neben dem Waschbecken, im Flur, im Empfangsbereich, in der Kantine oder an anderen stark frequentierten Stellen montiert werden. Direkt an der Wand oder mobil mit der Desinfektionssäule.

CombiPlum Electronic

CombiPlum Electronic

**Verpackung**

1,0 L weiß mit Gehäuse

Art.Nr.

4302

Elektronischer Spender mit berührungsloser Funktion für die Dosierung der 1,0 L PE-Beutel. Geeignet für alle Arbeitsbereiche mit besonders hohen Hygieneansprüchen. Der batteriebetriebene Kunststoffspender kann mit und ohne Gehäuse verwendet werden. Lieferung incl. 4 AA Batterien. Bei häufigem Händewaschen beträgt die Nutzungsdauer der Batterien ca. ein Jahr.

Maße mit Gehäuse: H: 307 x B: 140 x T: 100 mm

Desinfektions-säule

**Verpackung**

Metall (anthrazitfarbig)

Art.Nr.

4305

Metallständer inkl.
CombiPlum Electronic:
mit Gehäuse

4308

Mobile Lösung für die Händedesinfektion. Besonders für den Einsatz in Anwendungsbereichen geeignet, bei denen eine Wandmontage des Spenders nicht möglich oder gewünscht ist. Die robuste Desinfektionssäule ist für die Montage aller CombiPlum Spenderausführungen geeignet.

Hinweis: Die Spender liegen der Lieferung bei und sind nicht an der Säule montiert.

Maße: H: 145 x B: 30 x T: 25 cm




CombiPlum System

Ein effektives, umweltfreundliches und hygienisches Spendersystem in Kunststoff oder Edelstahl. Die Ausführung des CombiPlum Systems ermöglicht eine leichte und einfache

Reinigung des Spenders. Die ideale Lösung für verschiedene Anwendungsbereiche mit besonders hohen Hygieneansprüchen wie z.B. Lebensmittelindustrie und Gesundheitswesen.

CombiPlum System

CombiPlum Foam		Verpackung 0,8 L weiß	Art.Nr. 4142	Spender für 800 ml PE-Beutel Schaumseife. Sparsam im Verbrauch, einfach nachzufüllen und zu reinigen. Maße: 0.8 L: H: 300 x B: 112 x T: 115 mm
Quadrant		Verpackung 0,45 L weiß	Art.Nr. 4158	Moderner Spender für die Dosierung unserer 0,45 L PE-Beutel. Der Spender mit dem schönen Design eignet sich perfekt für Restaurants, Bildungseinrichtungen, Büros und Verwaltungsgebäude. Maße: H: 140 x B: 140 x T: 70 mm
CombiPlum	   	Verpackung 0,5 L Edelstahl 1,0 L Edelstahl 0,5 L Kunststoff 1,0 L Kunststoff	Art.Nr. 4278 4279 4282 4292	Umweltgerechte, hygienische und formschöne Spenderlösung mit einem breiten Anwendungsbereich. In Kunststoff- oder Edelstahlausführung lieferbar. Die Produkte sind in luftdichten PE-Beuteln abgepackt, so dass sich keine Bakterien ansammeln können. Die Bedienung ist sehr leicht und einfach, denn der PE-Beutel wird nur mit dem Etikett in den Spender eingehängt. Dadurch ist auch eine optimale Entleerung des Beutels gewährleistet. Maße: 0.5 L Edelstahl: H: 190 x B: 90 x T: 165 mm 1.0 L Edelstahl: H: 240 x B: 100 x T: 165 mm 0.5 L Kunststoff: H: 230 x B: 102 x T: 110 mm 1.0 L Kunststoff: H: 300 x B: 112 x T: 115 mm

Plum Deutschland GmbH
Norden am Dorf 4a
D-27476 Cuxhaven
Tel. +49 (0)4721 681 801
Fax. +49 (0)4721 681 802
info@plum-deutschland.de
www.plum-deutschland.de

Handelspartner:

plum



Plum pH Neutral - Produktinformation

Beschreibung


pH Neutral ist ein wirksamer Phosphatpuffer, der bei Säuren und einer Vielzahl von alkalischen Substanzen neutralisierend wirkt. Die Lösung ist als Erste-Hilfe Maßnahme für die Spülung der Augen mit einer Spülzeit von 2 Minuten vorgesehen. Das Produkt ist mit einer ergonomisch geformten Augenschale ausgestattet und ermöglicht einen gleichmäßigen und weichen Sprühstrahl. Die Flasche soll beim Spülvorgang leicht zusammengedrückt werden. In der DUO Ausführung ist ein Augenaufsatz zum gleichzeitigen Spülen beider Augen für besonders gefährdete Arbeitsbereiche erhältlich. Für den Einsatz auf der Haut ist eine 1000 ml Flasche mit speziellem Sprühkopf lieferbar. Es handelt sich um ein Medizinprodukt gemäß der EU-Richtlinie 93/42/EWG. Ein Sicherheitsdatenblatt ist erhältlich.



Einsatzbereich

Ziel bei der Spülung mit pH Neutral ist es, den pH Wert so schnell wie möglich wieder auf ein unbedenkliches Niveau einzustellen, wenn Säuren oder Alkali mit dem Auge oder der Haut in Kontakt kommen. Bei der Spülung mit normalem Wasser oder 0,9 % Natriumchloridlösung ist zu beachten, dass nur ein Verdünnungs- und reiner Spüleffekt erreicht wird. Hierbei sind deshalb größere Mengen und längere Spülzeiten erforderlich (siehe auch Grafik Neutralisierungseffekt). Weitere Dokumentationen hinsichtlich der Wirksamkeit von pH Neutral stellen wir auf Anfrage gern zur Verfügung. Nach der Spülung mit pH Neutral empfehlen wir zur Fortsetzung die Plum Augenspüllösung mit 0,9 % Natriumchloridlösung. Hinweis: Ärztlicher Rat ist bei jeder Augenverletzung einzuholen.

Abbildung 1: Neutralisierungseffekt von pH Neutral und 0,9 % Natriumchloridlösung*

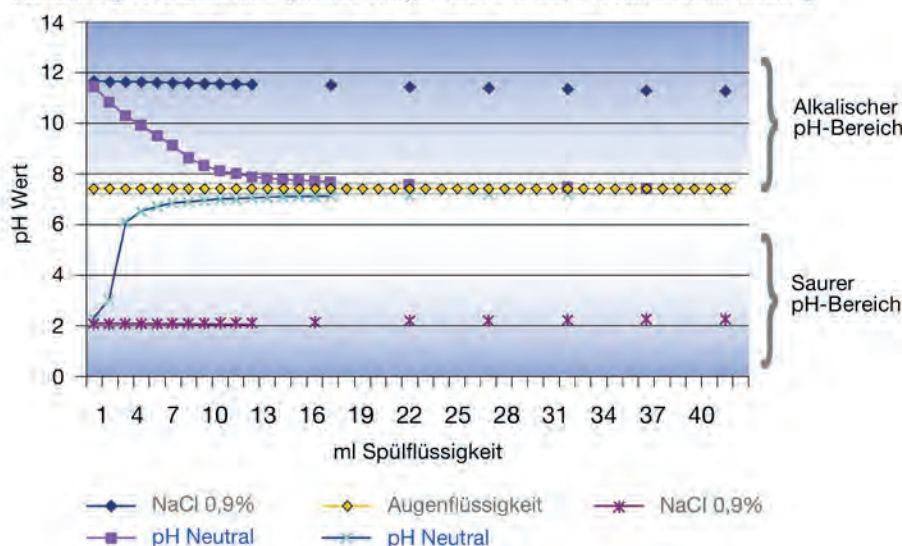

*Es handelt sich hierbei um eine von Plum A/S durchgeführte Titrationsanalyse im Labor (in vitro Test). Hierbei wurde die Flüssigkeit pH Neutral und 0,9 % Natriumchloridlösung schrittweise einer Lösung mit 1 Tropfen Schwefelsäure + 40 ml Leitungswasser bzw. 1 Tropfen Kaliumhydroxid + 40 ml Leitungswasser zugeführt. Die Änderungen des pH Wertes und die dafür erforderlichen Mengen von Spülflüssigkeit wurden für die Beurteilung des Effektes herangezogen.

Plum pH Neutral - Produktinformation



Ihre Vorteile beim Einsatz

- Hohe Funktionssicherheit - die Flaschen entsprechen der DIN EN 15154-4 (Augenduschen ohne Wasseranschluss)
- Flexible Systemlösung - in verschiedenen Flaschengrößen und Stationen für den Einzeleinsatz sowie für die Wandmontage an den direkt gefährdeten Arbeitsplätzen lieferbar.
- Effektive Spüllösung bei Verätzungsgefahr durch Säuren und einer Vielzahl an alkalischen Substanzen.
- Für nahezu jeden Einsatzbereich (z.B. Industrie, Werkstatt, Labor, Erste-Hilfe-Kasten, Mitführen in Fahrzeugen u.a.) geeignet.
- Schnell und leicht mit nur zwei Handgriffen zu verwenden - dadurch auch ohne fremde Hilfe von dem Verletzten selbst zu bedienen.
- Lange Haltbarkeit - ungeöffnet 3 Jahre haltbar und einsetzbar.
- Wartungsfrei - keine zusätzliche Reinigung sowie Austausch der Flüssigkeit wie bei herkömmlichem Wasser erforderlich.

Anwendung



Nehmen Sie die Flasche aus der Station.



Drehen Sie die Augenschale bis die Versiegelung bricht.



Den Kopf zurücklehnen und spülen.



Den Kopf nach vorne beugen und spülen wenn Ihre Kleidung nicht nass werden soll.

Hinweise zur Handhabung

Produkt zur einmaligen Benutzung. Nach Ablauf des Verfalldatums (s. Flaschenetikett) nicht mehr einsetzen. Die Versiegelung der Flasche muß unversehrt sein, um eine einwandfreie Handhabung zu gewährleisten. Bei Wiederverwendung von angebrochenen Flaschen besteht ein Infektionsrisiko.

Flaschengrößen

Inhalt	200 ml	500 ml Duo	1000 ml Körperdusche
Art.-Nr.	4752	4801	4746
Spülzeit	ca. 2 Min.	ca. 2 Min. je Auge	ca. 2 Min.
Abmessungen	H 165 x ø 55 mm	H 220 x ø 75 mm	H 270 x ø 85 mm